


MB MAGIC BODY

HOGYAN MŰKÖDIK AZ OKOSMÉRLEG?

CF516BLE

A mérleg Bioelektromos Impedancia Analízis (BIA) technológiával működik, amely a test izom és víz összetétele alapján végzi el a mérést. A mérleg enyhe elektromos áramot vezet végig a testen keresztül, ezáltal megmérve a test ellenállásának (impedanciájának) mértékét, ami a zsírosszetétel nagyságával nő, az izom és víz összetétel nagyságával pedig csökken.

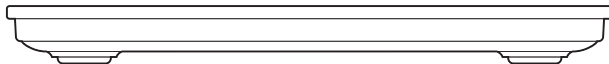

FIGYELEM:

- A mérleg nem diagnosztizál vagy kezel semmilyen egészségügyi problémát. Mielőtt diétába vagy intenzívebb edzésbe kezdene, konzultáljon kezelőorvosával.
- NE álljon a mérleg szélére vagy NE ugorjon rá.
- NE terhelje túl a mérleget (maximum 180 kg / 397 lb).
- NE merítse a mérleget vízbe.
- Kérjük használjon nedves ruhát vagy üvegtisztító kendőt a mérleg tisztítására.
- Mindig kemény, száraz és lapos felületre helyezve használja és tárolja a mérleget.
- Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritás szerint.
- Amennyiben hosszú ideje nem használta a mérleget, érdemes az elemket kivenni / kicserélni.

- Nem javasolt a mérleg használata pacemakerrel vagy egyéb orvosi eszközzel rendelkező személyek számára.
- Nem javasolt terhes nők számára, mivel a mérés így helytelen lesz.
- Meztláb, száraz lábbal lépjen rá a mérlegre, amikor testzsír százalékot és további adatokat szeretne mérni.
- Ne mérje meg magát rögtön egy inntenzív edzés után.
- A nap során mindig ugyanakkor vagy hasonló időpontban mérje meg magát.

A DOBOZ TARTALMA:

Okosmérleg, Használati útmutató

SPECIFIKÁCIÓ:

Méret: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 0,95 in

Kapacitás: 180 kg / 397 lb

Telep: 1,5V AAA x 3

Pontosság: 0,05 kg / 0,1 lb

Mértékegység*: kg / lb

***Megjegyzés:** Módosíthatja a súly mértékegységét a **Fitness U+** applikáció „Settings” (Beállítások) > „Unit Conversion” (Mértékegység átváltás) menüpontjában.

TAPASZTALJA MEG AZ OKOSMÉRLEG ÖSSZES FUNKCIÓJÁT:

A Testanalizáló Okosmérleg Bluetooth segítségével kapcsolódik mobiltelefonjához vagy tabletjéhez. A mérleg által készített testösszetétel elemzés a **Fitness U+** nevű applikációban jelenik meg, melyet egyszerűen le tud tölteni **iOS App Store**-ból vagy **Google Play Áruház**ból.


Kérjük, kapcsolja be a készülékén a helymeghatározást, engedélyezze a GPS hozzáférést, mivel a Bluetooth kapcsolathoz szükséges.

Kompatibilis eszközök:


1. Bluetooth 4.0 vagy újabb verziót támogató okos eszközök.
2. Android 4.3 / iOS 8,0 vagy újabb operációs rendszert futtató eszközök.

ÚTMUTATÓ A PÁROSÍTÁSHOZ:


1 Helyezze be az AAA elemeket a mérlegbe. Tegye a mérleget egyenletes, szilárd talajra, majd lépjen rá 3 másodpercre a gyors kalibrálás elvégzéséhez. Győződjön meg róla, hogy a mérleg számlálója felvillan-e, majd visszatér 0,0-ra, jelezve, hogy a kalibrálási folyamat befejeződött.

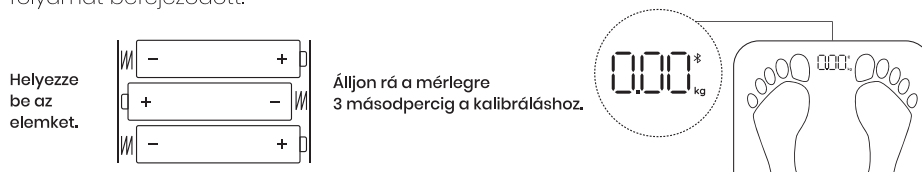

2 Töltse le a **Fitness U+** applikációt **iOS App Store**-ből vagy a **Google Play Áruház**ból. A letöltéshez olvassa le az itt feltüntetett QR kódot, vagy keressen rá a "Fitness U+"-ra a keresőben és töltsse le az alkalmazást. Ezután engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot eszközén. **Ne próbálja meg a Bluetooth beállításokon belül párosítani az eszközöket, mert az csak az alkalmazáson belül lehetséges.**

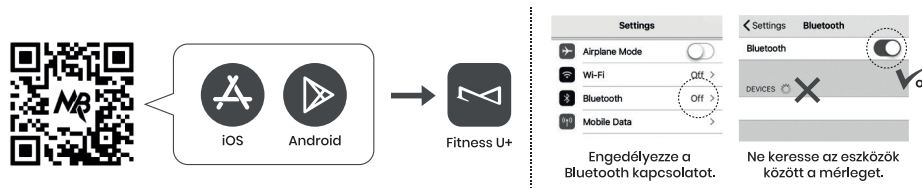


3 Telepítse az alkalmazást. Amennyiben Ön android-os felhasználó, úgy az alkalmazás kérni fogja az engedélyt a helymeghatározás bekapcsolásához. Ez nem az applikáció része, hanem az Android rendszer számára elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bluetooth kapcsolat létrejöjjön. Engedélyezze ezt a funkciót, és folytassa tovább a beállításokat.

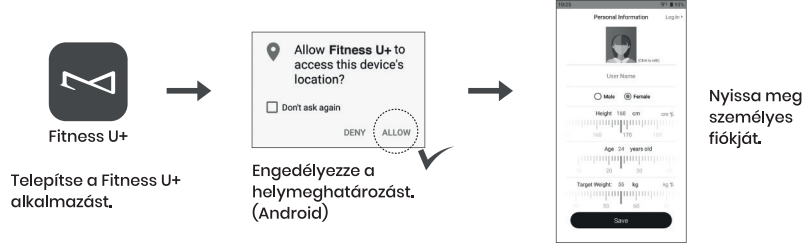


4 Ezek után lehetősége van online fiók létrehozására vagy tárolhatja az adatait offline is. Amennyiben online fiókat szeretne használni, abban az esetben kattintson a "Log in" (Bejelentkezés) gombra a jobb felső sarokban. Töltse ki a szükséges mezőket az új személyes fiók regisztrációjához. Offline fiók létrehozásához csupán az első információk oldalt kell kitöltenie, majd kattintson a "Save" (Mentés) gombra.




5 Akár online, akár offline fiókot hoz létre, ki kell töltenie bizonyos mezőket úgy, mint a Name (név), Gender (nem), Height (magasság), Date of Birth (születési év), Target Weight (célsúly). A nem, a magasság és a kor kiemelten fontos adatok ahhoz, hogy az alkalmazás kiszámolja a pontos testsúlyt. Az avatarrá kattintva megváltoztathatja fiókja profilképét.

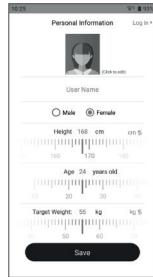


↓ Regisztrálja fiókját.

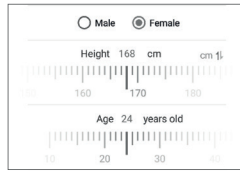

Adjon meg pontos adatokat a nem, kor és magasság mezőkhöz.

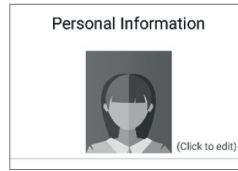

Ha profilképet cserélné, kattintson az avatarrá.

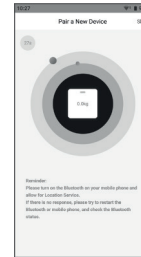

6 A fiókja létrehozás után folytassa a folyamatot az alkalmazás és az okosmérleg párosításával. Lépjen a mérlegre mezítláb, így elkezdheti az applikáció és a mérleg párosítását. Maradjon a mérlegen nem kevesebb, mint 20 másodpercig. Amennyiben sikeres volt a mérés, az alkalmazás egy üzenetet fog megjeleníteni a mért testsúllyal. Kattintson a "Confirm" (megerősítés) gombra a folytatáshoz.




20mp

Maradjon a mérlegen nem kevesebb, mint 20 másodpercig.

Amíg a párosítás tart,




legyen a mérleg szilárd talajon.

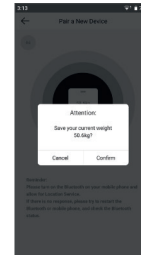

Kattintson a "Confirm" gombra, miután a párosítás sikeres volt.





RENDSZERES MÉRÉSEK

Miután a párosítás sikeresen megtörtént az applikáció és a mérleg között, a kezdőoldalon található gomb segítségével bármikor végezhet újabb méréseket. Kattintson a "Measure" (mérés) gombra, majd álljon rá a mérlegre. Maradjon a mérlegen, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a testsúlya, majd ezt három villogó szaggatott vonal fogja követni, melyek után megjelenik a pulzusa. Ezután a teljes testanalízis befejeződött. A mért testösszetétel értéket és leírásukat megtekintheti a "Data tab"-ra (adatfülre) kattintva.

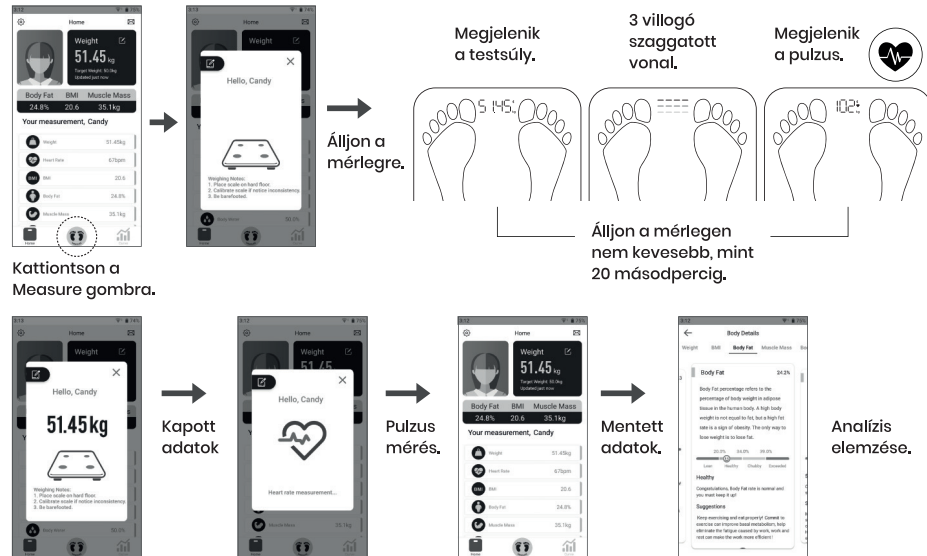


AZ OKOSMÉRLEG SÚLY KALIBRÁLÁSA (0 KG-RA)

A mérleg nem megfelelő elhelyezésével a mérések pontatlanná válhatnak, nem megfelelő elhelyezés lehet például a falnak támasztva, fejjel lefelé, egyenetlen vagy puha talajra helyezve, más tárgyak alá helyezve, és így tovább.

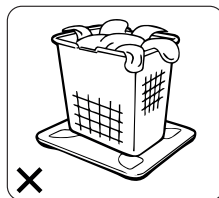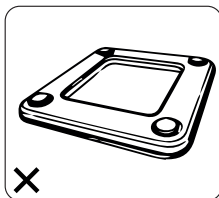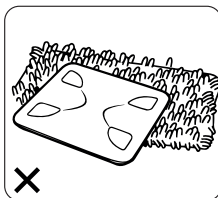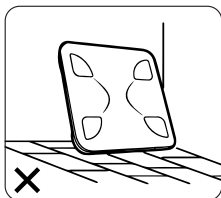


HOGYAN KALIBRÁLJA A MÉRLEGET:


1. Helyezze a mérleget kemény talajra.
2. Álljon a mérlegre.
3. Amikor a számok megjelennek a kijelzőn, lépjen le róla, így **0,0 kg-ot kell mutatnia.**
4. A mérleg ezáltal megfelelően vissza lett állítva 0 kg-ra.

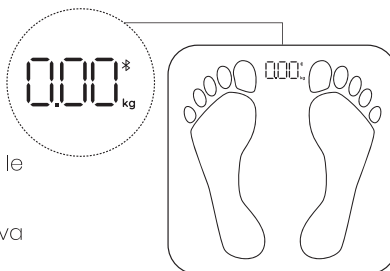

ÁTTEKINTÉS

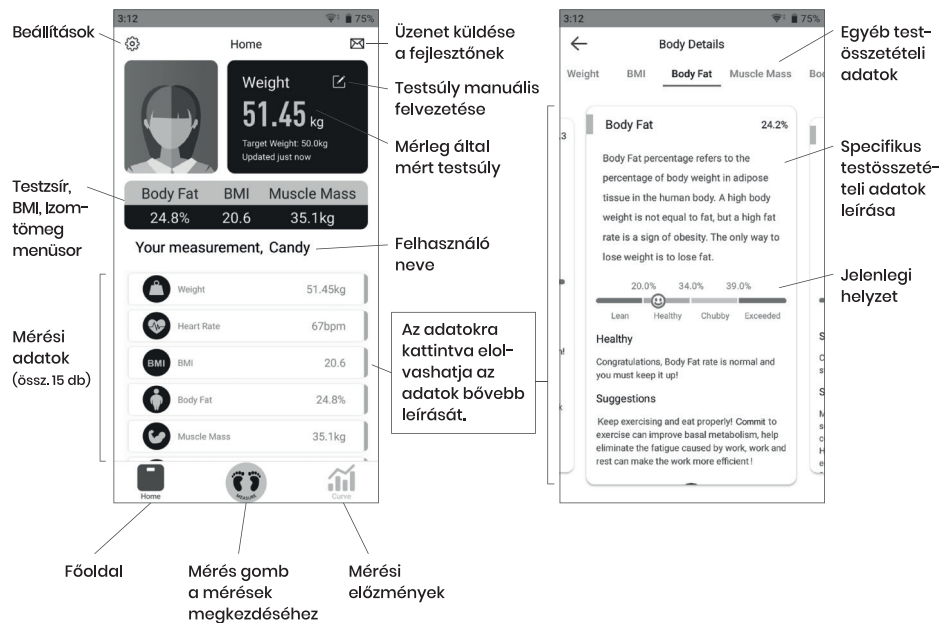


A mérések időpont szerint

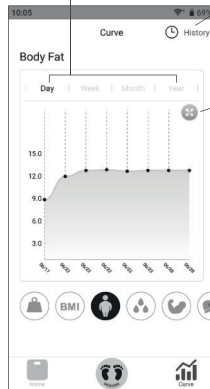

Megnézheti egy adott időpont mérése adatait a pontos dátum megadásával.

Felnagyíthatja a diagramot teljes képernyőre.

Megnézheti egy-egy testösszetételi adat eredményeit grafikonon.

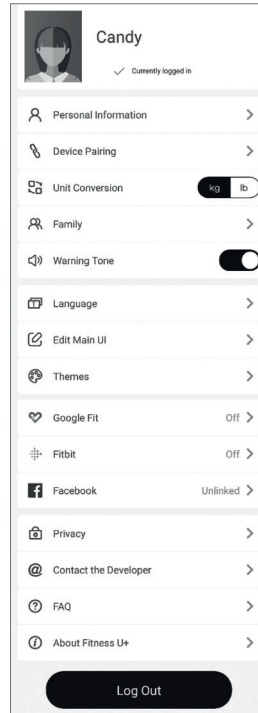

Személyes fiók szerkesztése

Kapcsolódó eszközök menedzselése

Mértékegység módosítása

Profilon belül több fiók létrehozása

Jelzőhang a mérés befejeztekor

Nyelv módosítása

Az adatok sorrendjének szerkesztése

Téma színének beállítása

Google Fit adatok szinkronizálása

Fitbit adatok szinkronizálása

Facebook link kezelése

Adatvédelmi szabályzat

Segítségkérés az ügyfélszolgálatától

GYK – Gyakran Ismételt Kérdések

Információ az applikációról

HIBAELHÁRÍTÁS

<p>A mérleg nem működik. Nem mutat semmit a kijelző. A kijelzőn megjelenő szám alatt eltűnik.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kérjük ellenőrizze, hogy az elemek be vannak-e helyezve.- Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelő polaritás szerint vannak-e elhelyezve.- Az elemek töltöttsége alacsony.
<p>A mérleg nem csatlakozik az alkalmazáshoz.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Győződjön meg róla, hogy engedélyezte a Bluetooth hozzáférést okostelefonján.- Megpróbálta párosítani a mérleget a Bluetooth beállításokon keresztül. Ez így nem működik, mivel a mérleget kizárólag a Fitness U+ applikáción keresztül lehet párosítani.- Kérjün indítsa újra a Bluetooth-t és a Fitness U+ alkalmazást okostelefonján.- Nem szabad egyszerre több eszközt párosítani Bluetooth-on keresztül a mérleghez. A sikeres párosításhoz kizárólag egy eszközt lehet egyszerre párosítani a mérleggel.
<p>A testsúly és a legtöbb adat hiányzik a mérésből.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Cipőt vagy zoknit viselt mérés során. Meztláb kell a mérlegre állni.- Megheledja a mérleg 180 kg / 397 lbs kapacitását.- Túl hamar lépett le a mérlegről. Rajta kell állnia legalább 20 másodpercig, amíg meg nem jelenik a pulzusszám.